


# DESIGNEN SIE FORTSCHRITTLICHE TEILPROTHESEN MIT LEICHTIGKEIT

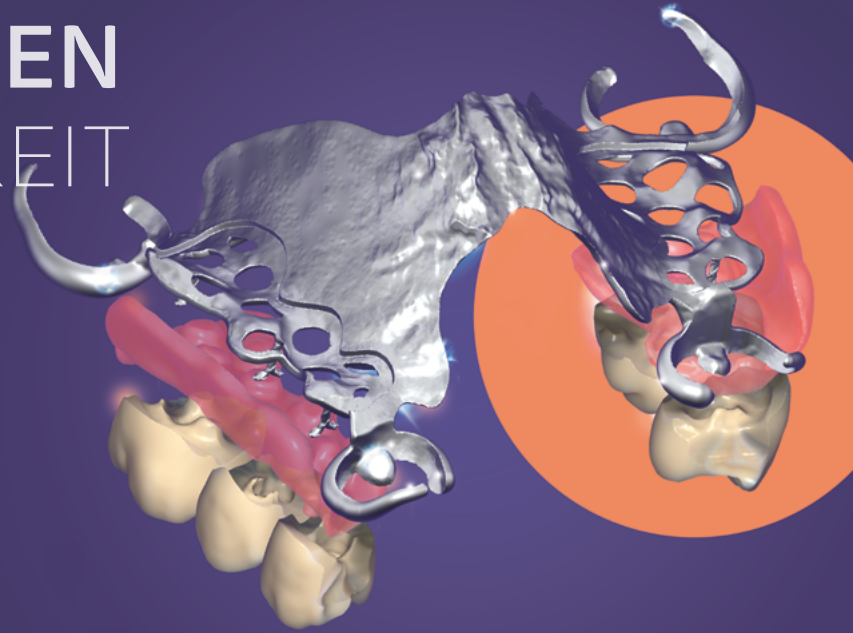

NEUIGKEITEN


## *PartialCAD 3.1 Rijeka* auf einen Blick

*PartialCAD 3.1 Rijeka* beschleunigt Ihre Workflows mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, die Sie begeistern wird.

### Gehen Sie digital mit allen Komponenten Ihrer Teilprothese



Das zum Patent angemeldete **QuickSnap\*** Feature zerlegt die Prothese in ihre Einzelteile und ermöglicht den akkuraten Zusammenbau von gedruckten und gefrästen Bestandteilen durch einfaches Zusammenstecken – das spart Zeit und standardisiert Ihre Workflows.

Zähne, Gingiva oberhalb und unterhalb des Retentionsgitters sowie Gerüste können komplett durch CAD/CAM in den jeweiligen Materialien gefertigt werden.

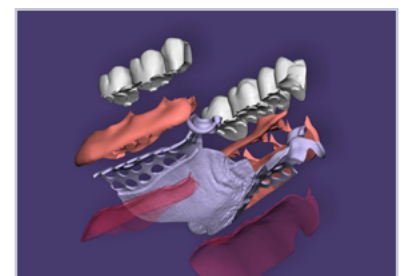

## Intuitivere und schnellere Benutzeroberfläche


- **Passen Sie Ihre Designs effektiv an:** Voreinstellungen ermöglichen die schnelle und einfache Anwendung Ihrer individuellen Design-Einstellungen.
- **Vereinfachte Bearbeitung von Klammern und Stegen:** Stellen Sie die Stärke und Breite jedes Stegs und jeder Klammer einfach mit dem Mausrad ein.
- **Mehr Automatisierung und vereinfachte Bearbeitung:** Das neue Gitterrahmen-Feature erzeugt automatisch einen verstärkten Rahmen um Ihre Retentionsgitter. Die interaktive Bearbeitung von Abschlusskanten ist nun schneller und intuitiver.
- **Jedes Element der Benutzeroberfläche wurde aktualisiert:** Genießen Sie die verbesserte Bedienbarkeit und Lesbarkeit im Stil von *DentalCAD*.

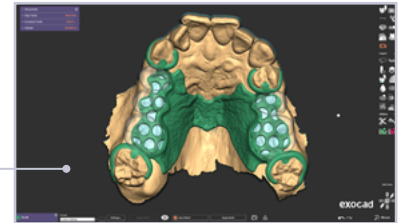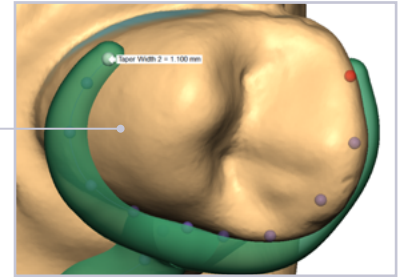

---

## Neue Messwerkzeuge

- **Wachsdimensionen anzeigen:** Erfassen Sie die Dimensionen des gesamten Designs in einer verbesserten Vorschau für die Produktionsplanung und den Druck.
- **Schnittansicht:** Prüfen Sie Designs und nehmen Sie mehrere Messungen der Schichtstärke gleichzeitig vor.

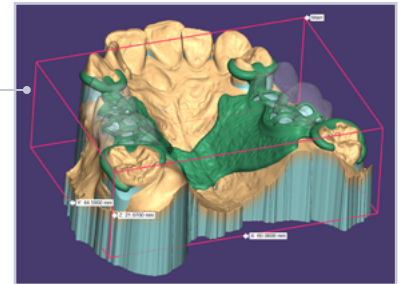

---

## Steuern Sie den Aufbau

- Das Aufbau-Werkzeug bietet neu angeordnete Einstellungen mit individuellen Voreinstellungen und eine animierten Explosionsansicht aller Bestandteile.



[exocad.com/partialcad-rijeka](https://exocad.com/partialcad-rijeka)

Finden Sie hier Ihren exocad Vertriebspartner: [exocad.com/partners](https://exocad.com/partners)

**exocad GmbH**

Einige Produkte sind möglicherweise nicht für den Vertrieb in allen Märkten zugelassen/freigegeben.  
Bitte kontaktieren Sie Ihren exocad Händler für weitere Informationen zum aktuellen Produktsortiment und zur Verfügbarkeit.

